

Návod k použití


Galvanická žehlička se senzorem pro typ pleti



Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Produkt, který jste si zakoupili, byl přísně testován, aby byl plně ve shodě s technickými standardy. Poté co si pozorně přečtete tento manuál, můžete jej bez obav používat

Bezpečnostní opatření

Prosím, řádně si přečtěte bezpečnostní opatření a řiďte se jimi

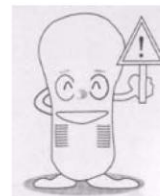

Varování

Tento výrobek by rozhodně neměl být používán následujícími osobami a na následující části těla:

- ✗ Osoby s nemocí srdce, dětmi
- ✗ Akutní nemoc / vysoká teplota – s tím související nemoc / tuberkulóza
- ✗ Osoby s bolestí některého nervu na tváři
- ✗ Osoby s vysokým krevním tlakem
- ✗ Těhotné ženy
- ✗ Ženy v menstruaci
- ✗ Na oči a oční víčka, uši, oblast kolem uší
- ✗ Na zraněná místa

Nebezpečí

Může způsobit chybnou operaci. Neužívejte současně s jiným léčebným elektronickým vybavením

1. Některý typ elektronického lékařského vybavení jako elektronický stimulátor a další
2. Život udržující elektronické lékařské vybavení jako umělé srdce
3. Zabudované elektronické lékařské vybavení jako ECG

Poznámka

- ✗ Nepoužívejte tento produkt pro jiný účel než je jeho originální použití
- ✗ Nedovolte dětem používat tento produkt
- ✗ Tento produkt není vodě odolný. Při používání se musí udržovat suchý, jinak může způsobit selhání. Neskladujte ani nepoužívejte v místnostech s velkou teplotou a vlhkostí jako je například koupelna
- ✗ Neházejte ani neupouštějte na zem
- ✗ Nepoužívejte s mokřýma rukama, to může způsobit elektrický šok
- ✗ Oprava / úprava / demontáž jsou zakázány. To může způsobit špatnou funkci mající za následek zranění nebo zkrat
- ✗ Pokud nastane selhání, zastavte používání a zanechte přístroj do místa. Kde jste zakoupili tento produkt.

Představení výrobku

Jedinečná uvolňující technologie ultra-iontů vytváří dočasné elektrické pole mezi povrchem pleti a hlubokou vrstvou kůže. Ionizovaná pleťová voda prostoupí zábrannou vrstvou do hluboké části kůže a pomůže buňkám absorbovat efektivně pleťovou výživu.

Ultra-ionty uvolňují toxiny pro urychlení výměny látek, urychlují rozklad melaninu, změkčují kůži, obnovují lesk a pružnost kůže

Představení iontové technologie a technologie dalekého infračerveného spektra

● Záporné ionty: Zmírňují a vstřebávají skvrny na kůži

Pleťoví experti uvádějí, že skvrny, které zůstávají v kůži, jsou všechny kladné částice. Čistící přípravek obvykle jen vyčistí povrch kůže, ale je obtížné, aby se dostal hluboce do kůže.

Expert na pokožku NY-E037 obsahuje čistící funkci záporných iontů. Sonda produkuje silné záporné ionty. Opačné elektrické náboje se navzájem absorbují a díky tomu mohou záporné ionty zmírnit a absorbovat většinu skvrn a vyčistit tak hluboce kožní průduchy.

● Kladné ionty: důkladně podpoří vyživování kůže

Vyživující pleťová kosmetika může dosáhnout jen povrchové vrstvy na kůži, takže hluboké buňky nemohou přijímat výživu. Vyprodukované kladné ionty pronikají kůží a přinášejí výživu hluboko pod povrch kůže. To může urychlit reaktivační cyklus a stimulovat oběh krve, obnovit pružnost kolagenových vláken pro redukci vrásek a povzbudit kůži.

● Daleké infračervené spektrum: rozšíří průduchy a hluboce čistí

Tepelná energie dalekého infračerveného spektra proniká do šikry, podkožního tuku a vlasečnicových cévek. To je užitečné pro zásobování základních prvků pro elasticitu tkáňových buněk. Zároveň také napomáhá vyběl flek na kůži.

Popis přístroje



Tlačítka hlavní jednotky

- Zapnutí / Vypnutí: Zapíná a vypíná přístroj
- Typ kůže: Vybírá režim hodící se ke stavu vaší kůže
- Režim: Volí režim
- LCD displej: zobrazuje "Typ kůže" a "Režim" (modré podsvícení displeje se vypne po 30 sekundách)

Tlačítka inspektora kůže

- Zapnutí / Vypnutí: Zapíná a vypíná přístroj
- Start: započne testovací proces
- LCD: zobrazí výsledky testu. Automaticky se vypne po 50 sekundách

Používání pleťového inspektora

1. Zmáčkněte tlačítko Zapnutí / Vypnutí na inspektoru kůže. Objeví se indikátor stavu baterií.
2. Poté zmáčkněte tlačítko START a přiložte senzorové piny na měřenou část tváře
3. Po přibližně 5 sekundách se ozve zvuk pípnutí, na displeji se zobrazí číslo typu kůže

Poznámka:

- ✗ V případě, že senzorové piny nejsou řádně přiloženy ke kůži, měření může ukazovat odlišné výsledky na stejné části kůže
- ✗ V případě, že je měření prováděno na jiné části těla, než je tvář, výsledek měření může vykazovat chybu
- ✗ Předchozí případy indikují chybné měření, nemají však za následek rozbití přístroje a můžete znovu započít měření

Poznámka pro správné měření při používání pleťového inspektora

Nejdříve umyjte obličej, vyčkejte 15 minut a poté proveďte měření na tváři. Před měřením se ujistěte, že snímací plocha je čistá. Pokud není, utřete ji suchým hadříkem (pokud je na povrchu snímací plochy jiná látka, měření může vykazovat chybu).

Pokud jsou na kůži zbytky make-upu, měření taktéž nemusí vykazovat správné hodnoty.

- ➡ Pleťový inspektor reaguje velmi citlivě na vnější prostředí, úroveň vlhkosti je odlišná ráno a večer. Kvůli tomu se může zobrazovat jiný pleťový typ, dokonce i když je měření vzato ze stejné oblasti, záleží na ročním období, teplotě, vlhkosti, slunečním světle a zdraví člověka.



Používání hlavní jednotky

1. Zapněte přístroj tlačítkem **Zapnout / Vypnout**. Na displeji se objeví modré podsvícení
2. Zmáčkněte tlačítko **Typ kůže** pro výběr čištění typu kůže, která sedí vašim podmínkám
3. Zmáčkněte tlačítko **Režim** pro výběr režimu. Jakmile je vybrán režim, začne automaticky čištění.

Krok 1: Čištění (Cleaning)

1. Aplikujte čistící krém na tvář nebo krk
2. Vyberte typ kůže a režim čištění (Cleaning). Přístroj začne produkovat záporné ionty. Silné záporné ionty zjemní a absorbují skvrny v pórech a tím vyčistí pleť
3. Pohybujte pomalu přístrojem od středu až k okraji, od spodu navrch. Po použití jemně očistěte obličej horkým ručníkem.



- ➡ Osoby se suchou pleť by neměli používat přístroj po dobu, kdy bude pleť ještě sušší

Krok 2: Zavedení (Introducing)

1. Aplikujte výživný krém na tvář nebo krk
2. Vyberte typ kůže a přejděte na režim zavedení (Introducing). Přístroj začne produkovat kladné ionty. Díky efektu kladných iontů mohou být nyní výživné prvky zavedeny hluboce do kůže. To pomáhá buňkám absorbovat vodu a výživu, ihned vylepší oběh krve, urychlí výměnu látek, odstraní toxiny a oddálí stárnutí buněk kůže.
3. Pohybujte pomalu přístrojem od středu až k okraji, od spodu navrch. Po použití jemně očistěte obličej horkým ručníkem.

- ➡ Efekt bude lepší, pokud po režimu zavedení bude následovat lifting

Krok 3: Lifting

1. Aplikujte liftingový krém na tvář nebo krk
2. Vyberte typ kůže a přejděte na režim lifting. Přístroj začne produkovat mikro-proud a dlouhé infračervené spektrum. To masíruje kůži, stimuluje skvrny na tváři, smršťuje póry, stahuje buňky a liftuje pokožku a škáru.
3. Pohybujte pomalu přístrojem od středu až k okraji, od spodu navrch. Po použití jemně očistěte

- ➡ Efekt bude lepší, pokud po režimu zavedení bude následovat lifting nebo lifting budete provádět před spaním

Varování před použitím

1. Před použitím sundejte z obličeje všechny kovové části
2. Nesmí být používán na oči a oční víčka
3. Osoby s citlivou kůží by se před používáním měli raději poradit se svým doktorem

Technické parametry

Adaptér		Vstup: 230V AC / 50Hz Výstup: 4.5V DC/150mA
Doba nabíjení hlavní jednotky		Přibližně 7-8 hodin
Nabíjecí baterie pro hlavní jednotku		3.6V / 500mA
Baterie pro pleťový inspektor		2025 / 1.5V
Dlouhé infračervené spektrum		630nm
Odběr proudu	Hlavní jednotka	Max.85mA, Min.6.5mA
	Pleťový inspektor	2.5mA
Délka napájecího kabelu		1.8 m
Váha		400g

Otázky a odpovědi

Otázka: Jak často doporučujete používat tento přístroj?

Odpověď: Doporučujeme používání každý den. Uvnitř těla se nemůže vytvořit vitamín C a také kvůli hromadění je každodenní používání efektivní.

Otázka: Kde můžeme očekávat efekt iontové stimulace?

Odpověď: Nejvíce očekávaný efekt je vybělení kůže, zlepšení akné, vyhlazení mastné pokožky a prevenci tvorby vrásek

Otázka: Jak můžeme efektivněji používat tento přístroj?

Odpověď: V kterémkoliv kroku, základním pohybem při použití je pohyb od středu ke krajím, zespodu nahoru.

Otázka: Může být používán nějaký make-up?

Odpověď: Doporučujeme ve vodě rozpustnou kosmetiku. Pokud budete vybírat některá kosmetický produkt, vybírejte bezbarevné produkty, které neobsahují parafin nebo parfém

Otázka: Může být souběžně používán s dalšími nástroji péče o pokožku?

Odpověď: Ano, ale vyhněte se používání v ten stejný den

Otázka: Musí být aplikovány všechny 3 kroky?

Odpověď: Všechny 3 kroky jsou výborné. Nicméně, můžete si zvolit například krok 1 (čištění) společně s krokem 3 (lifting).



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

**Eva Chmelová,
Smetanovy Sady 1554,
431 11 Jirkov**